



artis neo

horno de cerámica
forno per ceramica



artis neo

El horno de cerámica **artis neo** beneficia de una construcción robusta combinada con un diseño ergonómico.

La calidad de cocción es excepcional gracias a su cámara de calentamiento. La resistencia de calentamiento de alta densidad de potencia proporciona la energía infrarroja (2.5 a 2.7 μm), ideal para la cocción de cerámica. La vaina de cuarzo de pequeño espesor garantiza la máxima permeabilidad óptica. Los materiales aislantes que rodean la vaina de cuarzo, así como el soporte de cocción, son de baja inercia térmica, lo que permite ciclos «subida, bajada» más cortos y con bajo consumo eléctrico.

*Il forno per ceramica **artis neo** beneficia di una costruzione robusta combinata con un design ergonomico.*

La qualità della cottura è eccezionale grazie alla sua camera di riscaldamento. La resistenza di riscaldamento d'elevata densità di potenza fornisce l'energia a infrarossi (da 2,5 a 2,7 μm), ideale per la cottura della ceramica. La guaina di quarzo sottile garantisce la massima permeabilità ottica. I materiali isolanti in fibra che circondano la guaina di quarzo, così come il supporto di cottura, sono di bassa inerzia termica, che consente cicli «salita, discesa» più brevi e con basso consumo energetico.



Características técnicas

- 100 programas libres
- 1 tableta de aluminio amovible para depositar los trabajos realizados
- 1 soporte de cocción
- 5 idiomas disponibles: francés, inglés, alemán, italiano y español
- Dimensiones (altura, anchura, profundidad): 572 mm x 320 mm x 360 mm
- Peso: 20 kg
- Potencia máxima: 1300 kW
- Tensión: 230V (50/60Hz)

Caratteristiche tecniche


- 100 programmi liberi
- 1 tavoletta in alluminio removibile per la rimozione dei lavori completati
- 1 supporto di cottura
- 5 lingue di visualizzazione: francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo
- Dimensioni (altezza, larghezza, profondità): 572 mm x 320 mm x 360 mm
- Peso: 20 kg
- Potenza: 1300 W
- Tensione: 230 V (50/60 Hz)

Bomba de vacío

Pompa del vuoto

- Grupo hermético sin baño de aceite, con válvula antirretorno.
- Mejora considerable de la cocción.
- Recomendada para el horno de cerámica artis neo.

-
- Gruppo ermetico senza bagno d'olio, con valvola di non ritorno.
 - Migliora notevolmente la cottura.
 - Consigliato per forno per ceramica artis neo.

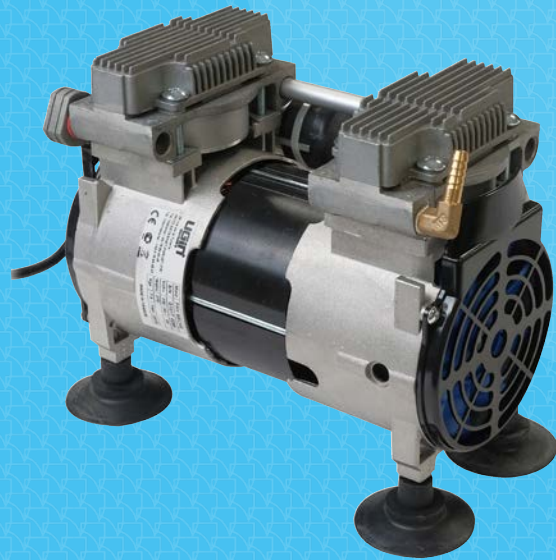

Características técnicas

- Caudal: 54 L/min (50 Hz) - 63 L/min (60 Hz)
- Vacío máximo: 745 mmHg - 29,33 inHg - 993,25 mbar
- Dimensiones (altura, anchura, profundidad): 210 mm x 155 mm x 250 mm
- Peso: 7.6 kg
- Tensión: 230V (50/60Hz)

Caratteristiche tecniche

- Portata: 54 L/min (50 Hz) - 63 L/min (60 Hz)
- Vuoto massimo: 745 mmHg - 29,33 inHg - 993,25 mbar
- Dimensioni (altezza, larghezza, profondità): 210 mm x 155 mm x 250 mm
- Peso: 7.6 kg
- Tensione: 230 V (50/60 Hz)

25 rue de la Tuilerie · 38170 Seyssinet-Pariset · FRANCE
Tél. national : 04 76 84 45 45
Tel international : (+33) 4 76 84 45 43
info@ugin-dentaire.fr
export@ugin-dentaire.fr

ugindentaire.fr  

UGiN
Dental laboratory solutions